



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Medical Devices

**Administración de medicamentos
por sonda enteral**

recomendaciones generales para
el paciente

La protección es Nutrición Emocional



Administración de medicamentos por sonda enteral

recomendaciones generales para el paciente




1

Antes de empezar a administrar los medicamentos por sonda, **debe lavarse bien las manos** con agua y jabón.




2

Nunca añada los medicamentos directamente a la nutrición enteral. Debe administrarlos con una jeringa a través de la sonda.

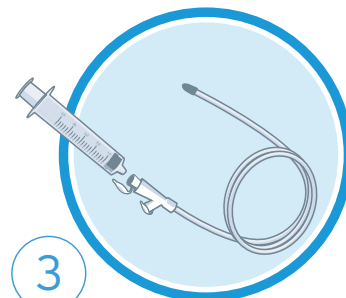

3

Con la ayuda de una jeringa, **lave la sonda** con 15 - 30 ml de agua mineral antes y después de administrar el medicamento.

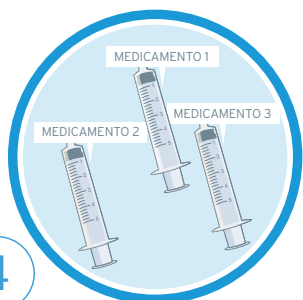

4

Cuando tenga que administrar **más de un medicamento**, hágalo de forma separada (no lo mezcle en la misma jeringa). Lave la jeringa con 15-30 ml de agua mineral antes y después de administrar cada medicamento.




5

Si tiene que administrar **medicamentos líquidos** (jarabes, soluciones, gotas...), dilúyalos previamente en 15 - 30 ml de agua mineral.




6

Si está tomando **más de un medicamento líquido**, adminístrelos de forma separada, empezando por el menos espeso.

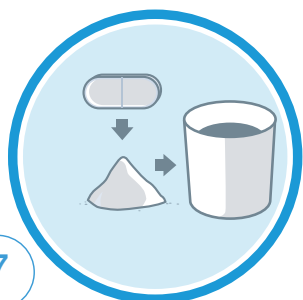

7

Si tiene que administrar un **comprimido**, tritúrelo hasta obtener un polvo fino y después dilúyalo en 15 - 30 ml de agua mineral.

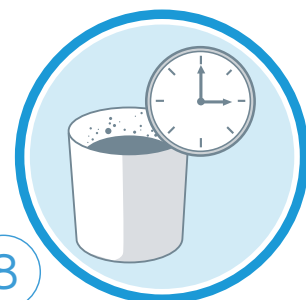

8

Si es un **comprimido efervescente**, disuélvalo en agua y espere a que desaparezcan las burbujas antes de administrarlo.



9

Si es una **cápsula**, ábrala y diluya su contenido en 15 - 30 ml de agua mineral.


Administración de medicamentos por sonda enteral

recomendaciones generales para el paciente



10

Si tiene que administrar un medicamento en polvo (sobres...), dilúyalo en **60 - 90 ml de agua** mineral.

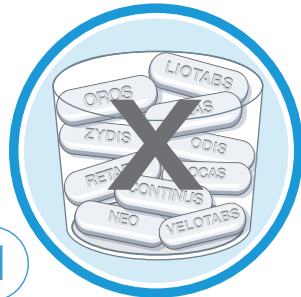

11

De forma general, **no se pueden administrar por sonda** los medicamentos de liberación prolongada, liberación sostenida o retardada, medicamentos con cubierta entérica, cápsulas con microgránulos entéricos o formas sublinguales. Son medicamentos cuyo nombre contiene el término: oros, retard, neo, ocas, continus, flas, velotabs, liotabs, odis, zydis. **Tampoco se pueden triturar la mayoría de los citostáticos orales en forma de comprimidos.**



12


Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar alguno de estos medicamentos: digoxina, fenitoína, omeprazol, warfarina, acenocumarol, levotiroxina, levodopa, ciprofloxacino, tetraciclinas, antiácidos que contengan aluminio y sucralfato.



13


Cuando tenga cita con su médico, recuérdale que es **portador de sonda enteral**, para que pueda prescribirle las formas farmacéuticas más adecuadas (preferentemente en forma líquida).


Otras recomendaciones:




Las sondas de nutrición enteral se llaman **Freka®**



Producto	Referencia	Descripción
	Freka® Tube 8 FR, ENFit	7981827
	Freka® Tube 10 FR, ENFit	7981828
	Freka® Tube 12 FR, ENFit	7981829
	Freka® Tube 15 FR, ENFit	7981830
	Freka® Decompresión Tube 15 FR	7980115
		Sondas nasogástricas para la administración de la nutrición enteral a corto plazo. Sonda nasogástrica de aspiración y/o descompresión.

Producto	Referencia	Descripción
	Freka® PEG 9 FR, ENFit	7755642
	Freka® PEG 15 FR, ENFit	7755643
	Freka® PEG 20 FR, ENFit	7755644
		Sondas de gastrostomía endoscópica percutánea.

Producto	Referencia	Descripción
	Freka® Gastrotube 15FR, ENFit	7755648
		Sonda de balón para la sustitución de una PEG.

Producto	Referencia	Descripción
	Freka® FCJ 9FR, ENFit	7755645
		Sonda de yeyunostomía quirúrgica.